

НОВЫЙ ПРОДУКТ ИНФОРМАЦИОННЫЙ ЛИСТ

Возможно изменение технических характеристик
© OMRON HEALTHCARE EUROPE B.V.

OMRON NE-C24 Kids (NE-C801S-KDRU)



Компрессорный ингалятор (небулайзер)

Характеристики продукта:

- Небулайзер для детей домашнего использования
- 2 детских аксессуара в комплекте (кролик, медвежонок)
- Широкий спектр применяемых лекарственных препаратов
- Технология виртуальных клапанов (V.V.T.)
- Простое управление одной кнопкой
- Пониженный уровень шума
- Легкая очистка и обработка деталей небулайзерной камеры
- Соответствие Европейскому стандарту EN 13544-1
- Сумка для хранения в комплекте

Позиционирование: Медицинский прибор для домашнего использования. Идеальный прибор для детей и младенцев, благодаря детскому дизайну небулайзерной камеры, пониженному уровню шума и компактным размерам.

NE-C24 Kids дополняет линейку компрессорных ингаляторов (небулайзеров) OMRON для домашнего и профессионального использования, являясь модификацией небулайзера NE-C24.

Медицинское назначение	Данное устройство предназначено для вдыхания лекарственного средства при различных респираторных заболеваниях.
Пользователь	<ul style="list-style-type: none">• Квалифицированные медицинские специалисты (врачи, медицинские сестры и физиотерапевты).• Лица, осуществляющие уход за пациентом, или пациенты под контролем квалифицированных медицинских специалистов в домашних условиях.• Кроме того, пользователь должен понимать основные принципы действия прибора NE-C24 Kids и содержание руководства по эксплуатации.
Пациенты	Данное устройство не должно использоваться пациентами, которые находятся без сознания или не дышат самостоятельно.
Среда	Данный прибор предназначен для использования в таких медицинских учреждениях, как больницы, поликлиники и кабинеты врачей, а также в обычных жилых помещениях.

Данное устройство полностью соответствует требованиям директивы ЕС 93/42/ЕЕС (директива для медицинских устройств).


Стандарты:	EN 60601-1:1990+A1:1993+A2:1995
	EN 60601-1-2: 2007
	EN 60601-1-6: 2007
	EN 980: 2008
	EN 1041: 2008
	EN ISO 14971: 2009
	EN 62366: 2008
	EN ISO 10993-1: 2009
	EN ISO 10993-5: 2009
	EN ISO 10993-10: 2009
	EN 13544-1: 2007

Сравнительная таблица NE-C24 и NE-C24 Kids:

NE-C24 Kids – модификация небулайзера NE-C24. Все технические характеристики абсолютно идентичны. Разница заключается в цвете корпуса и количестве и типе аксессуаров в комплекте.

	NE-C24 Kids (NE-C801S-KDRU)	NE-C24 (NE-C801S-RU)
		
Цвет	желтый	белый
Тип	компрессорный	компрессорный
Источник питания	100-240 В, 50/60 Гц	100-240 В, 50/60 Гц
Средний размер частиц аэрозоля	3,0 мкм	3,0 мкм
Производительность	0,3 мл/мин	0,3 мл/мин
Уровень шума	43 дБ	43 дБ
Объем резервуара	2-7 мл	2-7 мл
Технология небулайзерной камеры	V.V.T.-технология (без клапанов)	V.V.T.-технология (без клапанов)
Маски в комплекте	Для взрослых, для детей, для младенцев	Для взрослых, для детей
Дополнительные аксессуары	2 детских аксессуара в комплекте	Насадка для носа
Внешние размеры	142x72x98 мм	142x72x98 мм

Пример инструкции:

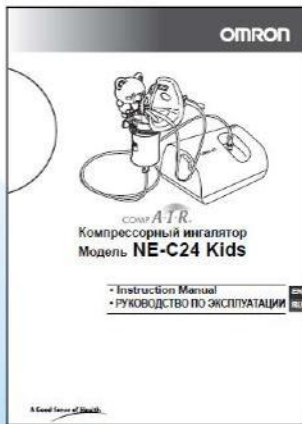

Пример упаковки:



Фото:



Технические характеристики модели OMRON NE-C24 Kids:

Наименование:	Ингалятор компрессорный
Модель:	NE-C24 Kids (NE-C801S-KDRU)
Источник питания (адаптер переменного тока):	100 - 240 В ~ 350 мА, 50/60 Гц
Источник питания (компрессорный небулайзер):	12 В=0,8 А
Режим работы:	Прерывистая работа 20 мин. «Включено»/40 мин. «Выключено»
Условия эксплуатации: температура окружающего воздуха относительная влажность	от +10°C до +40°C от 30% до 85%
Условия хранения: температура окружающего воздуха относительная влажность атмосферное давление	от -20°C до +60°C от 10% до 95% от 70 до 106 кПа
Масса:	Не более 270 г (только компрессор)
Габаритные размеры	Не более 142 (Ш) × 72 (В) × 98 (Г) мм
Комплект поставки:	Компрессор, небулайзерная камера, детские аксессуары (веселый медвежонок, счастливый кролик), воздуховодная трубка (ПВХ, 100 см), запасные воздушные фильтры – 5 шт., загубник, маска для взрослых (ПВХ), маска для младенцев (ПВХ), маска для детей (ПВХ), адаптер переменного тока, сумка для хранения, руководство по эксплуатации, гарантийный талон.
Классификация:	оборудование II класса, применяемый компонент типа В

Технические характеристики небулайзерной камеры с компрессором OMRON NE-C24 Kids с использованием технологии OMRON V.V.T. (Virtual Valve Technology - технология виртуальных клапанов):

Размер частиц:	**MMAD прибл. 3 мкм MMAD = Mass Median Aerodynamic Diameter (аэродинамический диаметр частиц средней массы)
Емкость резервуара для лекарственных средств:	макс. 7 мл
Соответствующий объем лекарственного средства:	мин. 2 мл – макс. 7 мл
Уровень шума:	*Прибл. 46 дБ
Производительность (выход аэрозоля):	*Прибл. 0,3 мл/мин. (по потере веса)
Подача аэрозоля:	**0,47 мл (2 мл, 1% NaF)
Скорость подачи аэрозоля:	**0,06 мл/мин. (2 мл, 1% NaF)

Используемые материалы:

Деталь	Материал
Небулайзерная камера	Полипропилен
Загубник	Полипропилен
Детский аксессуар	Полипропилен, ПВХ (не содержит фталат)
Воздушный фильтр	Полиэстер
Крышка воздушного фильтра	АБС-сополимер
Маска для взрослых	ПВХ (не содержит фталат)
Маска для детей	ПВХ (не содержит фталат)
Маска для младенцев	ПВХ (не содержит фталат)
Воздуховодная трубка (100 см)	ПВХ (не содержит фталат)

Производитель	OMRON HEALTHCARE CO., LTD. (ОМРОН ХЭЛСКЭА КО., ЛТД.) 24, Yamanouchi Yamanoshita-cho, Ukyo-ku, Kyoto, 615-0084, JAPAN (24, Яманучи Яманошита-чо, Юкио-ку, Киото, 615-0084, ЯПОНИЯ)
Представитель в ЕС	OMRON HEALTHCARE EUROPE B.V. (ОМРОН ХЭЛСКЭА ЕВРОПА Б.В.) Kruisweg 577, 2132 NA Hoofddorp, THE NETHERLANDS (Крузвег 577, 2132 НА Хуфддорп, НИДЕРЛАНДЫ) www.omron-healthcare.com
Производственное подразделение	OMRON (DALIAN) CO., LTD. (ОМРОН (ДАЛЯНЬ) КО., ЛТД.) Economic & Technical Development Zone Dalian 116600, CHINA (Экономик энд Текникал Девелопмент Зоне Далянь 116600, КИТАЙ)

Сделано в Китае

Спецификации упаковки модели OMRON NE-C24 Kids:

Упаковка	Кол-во	Прибл. вес	Прибл. Габариты Ш*В*Д (мм)
Прибор	1	330 г	142 x 72x 98
Товарная упаковка	1	1000 г	215 x 114 x 165
Мастер-картон	10	11,3 кг	603 x 456 x 205

Штрих-код	4015672105638
-----------	---------------